

全新定义 品质新高度

一流的企业是标准的制定者，站在全球的视野，
我们时刻都在以超前的理念定义品质的新高度。

佛山市安业医疗器械科技有限公司

Foshan ANYE Medical Apparatus Technology CO., LTD

地址：广东省佛山市南海区狮山镇穆院管理处“大氹岗”

Address: Da Dang Gang Management Office Muyuan Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guang Dong Of China.

外贸/Export department: +(86)757-8100 6901

国内/domestic: +(86)757-8100 6902

售后/After sale: +(86)757-8100 6904

传真/Fax: +(86)757-8100 6922

邮箱/Export department mail: sales1@anyeyl.cn sales2@anyeyl.cn sales3@anyeyl.cn

中国安业医疗官方网站

Websites: www.anyeyl.com

<http://anye-company.en.made-in-china.com>



0598

Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 2595AA, The Hague, Netherlands

EC REP
0598

本图册印刷于2023年2月
版权归佛山市安业医疗器械科技有限公司所有

图片仅供参考，以实物为准
All products subject to the practicality, the pictures just for reference
本公司保留不予以事先通知而进行产品改良之权利
Our company reserves the right to make any improvement on product design without advance notice



ANYE®
安业医疗

|全|新|定|义|品|质|新|高|度|



牙科综合康复治疗机
DENTAL REHABILITATION CHAIR



SPIRIT
安业精神
问道创新,追求卓越
恪奉品质,匠人精神

GOAL
安业目标
自主研发最具
商业价值产品

VISION
安业愿景
安业,致力于发展百年企业,
做您终身信赖的贴身管家

MISSION
安业宗旨
企业与社会和谐发展企业与客户
和谐共贏企业与员工和谐进步

关于安业 ABOUT ANYE

佛山市安业医疗器械科技有限公司是一家通过CE和ISO13485认证的牙椅原厂制造生产厂家,服务全球目前有60多个国家的牙医,工厂占地面积10000多平方米,集研发生产销售一体化。

安业以“全新定义牙椅品质新高度”为目标,从原材料切入,并且引进大量先进的数字化、自动化设备加工(例如:德国KUKA机械手、大族激光机、自动加工中心、全自动持重送料机、360度机械手自动电焊机等),是目前国内唯一一家以自动化理念,专业打造牙科综合治疗机的原装生产厂家,我们研发生产最稳定质量的产品和最合适的价格,让经销商在市场上拥有竞争优势,让牙医们用的也安心,专业的技术,专一的生产,专注的服务,将始终是安业对您真诚及永久的承诺。

欢迎全球客户莅临参观!佛山安业期待您的合作!

Foshan ANYE Medical Equipment Technology Co., Ltd is specialized in manufacturing and sales of high-end dental unit. Our group is established in 1998, it has passed ISO13485 and CE. The factory covers an area of more than 10,000 square meters.

To keep improving in production technology and product quality is ANYE's goal. ANYE completes everything from raw materials to finished dental units independently. There is a large number of advanced digital and automated equipment processing (E.g: German KUKA manipulator, Han's laser machine, automatic processing center, automatic load-bearing feeder, 360-degree manipulator automatic electric welding machine, etc.), ANYE is the only manufacturer of dental unit in the world that specializes in automation. The most stable quality products and the most suitable prices help dealers win the competitive edge which enables ANYE to have great sales in more than 70 countries.

ANYE is striving to build an exceptional brand recognized by the home and abroad dental industry. Professional technology, dedicated production service will always be ANYE's sincere and permanent commitment.

Sincerely hope to establish friendly business contacts and cooperative relations with friends in the global dental community.

COMPANY CERTIFICATE

医疗器械生产许可证

国家药品监督管理局

CE | ROHS

Lotus NL B.V.
Kortweg 10, The Hague, Netherlands






PROCESSING EQUIPMENT

加工设备



| 全 | 新 | 定 | 义 | 品 | 质 | 新 | 高 | 度 |

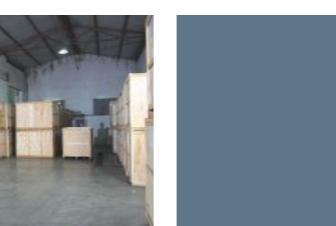

● DENTAL
● REHABILITATION
● CHAIR

牙科综合 康复治疗机

多方面解决部分人群看牙难题

独特设计理念 CONCEPT OF
comfortable design

安业对部分人群的重视是我们研发的指针。安业针对部分人群的行动不便性而研发设计并将方便性、舒适性、安全性、易用性放在首位，全面解决看牙难题。

The emphasis on special people is a guide for our R&D.Put convenience, comfort, safety and ease of use in the first place to solve the problem of teeth cure.




全国首创

牙科综合康复治疗机



全新升降平台
New lifting platform

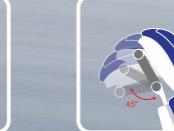

静音直流进口电机
Silent imported DC motor



舒适头枕
Comfortable headrest



LED口腔灯
LED dental light



红外线急停开关
Infrared emergency stop switch



简易操作
Easy operation

牙科综合 康复治疗机

多方面解决部分人群看牙难题

- 一键可设置冲痰/供水/记忆位
One button can set flushing, water supply, memory bit
- 一键可调节常用记忆椅位
One button can adjust common memories setting
- 一键可调至最佳吐痰位
One button can adjust to the best position for spitting

9个记忆

电动牙科椅控制系统
9 memories control system



豪华

可旋转/拆卸痰盒

易清洗、易消毒、方便拆卸。
Easy to clean, disinfect, and remove.

地箱

水电气总开关装置

Floor box with main switch

Unique Design

对品质的追求永不妥协
New definition, new height of quality

弧形头枕

可调节弧形防护头枕



弧形头枕，比传统头枕更舒适，能更好的固定头部，防止就诊时头部晃动。
Curved headrest
Adjusted Curved protective headrest
More comfortable than traditional headrest, Better fix the head and prevent shaking.




坚实

Solid

不锈钢底板

轨道磨砂防滑处理，支撑底板采用4mm不锈钢板，确保患者上下安全。
Stainless steel base plate
Frosted anti-slip track, 4MM stainless steel bottom plate to ensure patient safety

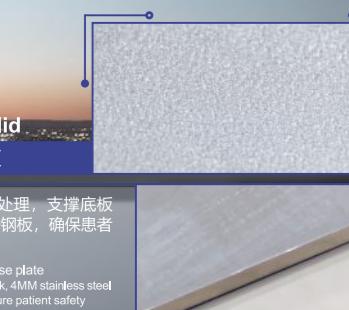

轮椅固定装置

按压式插拔接头，方便操作，安全稳固。

Wheelchair fixture

Push-type plug connector, easy operation and safety



Through the wheelchair



Insert the buckle



插入卡扣

固定位置



8孔LED口腔灯
8 Eyes LED operating light



可调节弧形防护头枕
Adjusted Curved protective headrest



置物托盘
Plate for storage




隐藏储水瓶
Hidden water bottle



副控: 助手工具盘
Auxiliary control: assistant tool tray



固定架 可旋转调节, 适合常用轮椅尺寸
Fixing frame rotatable adjustment for common wheelchair sizes

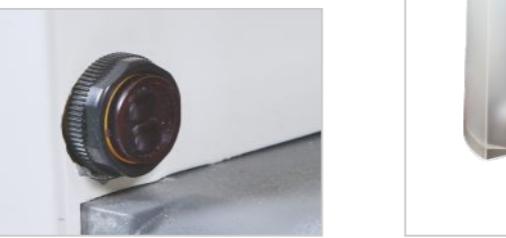

智能 红外线感应
Intelligent Infrared sensing



多功能脚踏控制开关 (带脚踏自锁功能)
Multifunctional foot control (with self-locking function)



轮椅固定装置
Wheelchair fixture



医用管 (进口)
Imported tube



减压阀 (进口)
Imported reducing valve



24V静音直流进口电机 (带补偿位)
24V noiseless DC motor (synchronized)




电磁阀 (进口)
Imported electromagnetism valve



豪华医生坐椅C
Dentist stool C

S Shop Drawing FOR REFERENCE

康复椅结构施工图

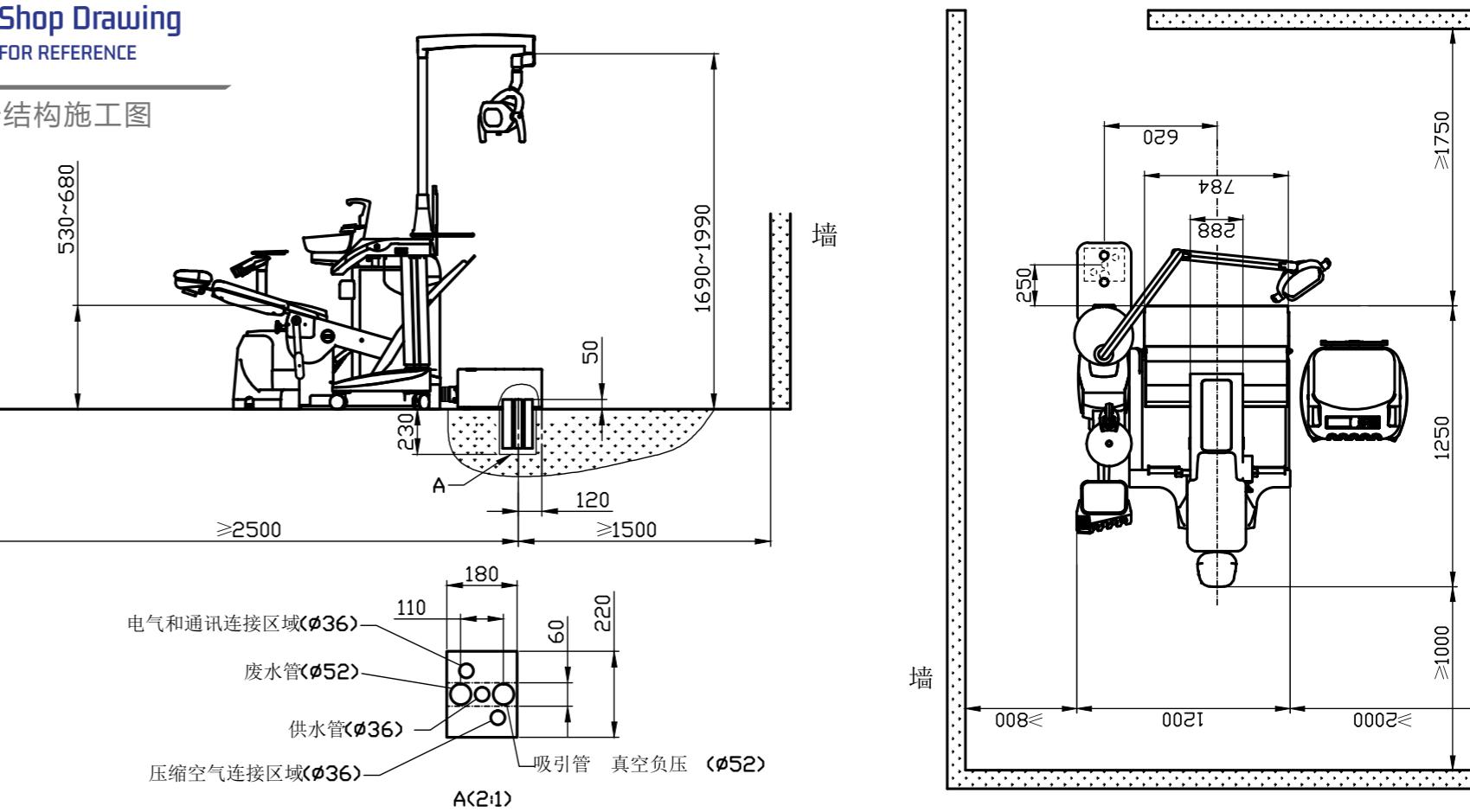

保养与维护

- 使用的水源要干净清洁, 以免造成牙椅内部管路及阀门堵塞。
- 空压机要经常排水, 时间久了不排水会造成空压机排出的气中有大量的水分, 导致牙椅气路老化或堵塞。(一月排一次为宜)
- 电机长期工作后要润滑保养, 可用黄油涂抹伸缩处。 (半年一次为宜)
- 尽量避免病人身上的锋利物品划破椅面。
- 不要在电源不稳定的情况下使用牙椅, 以免损坏牙椅内部电子部件。
- 夏天天气炎热时可拔开热水器开关; 冬天零下低温时, 应排出热水器里剩下的储水, 避免冻裂热水器。
- 每天工作完后切记一定要关闭电源和水气开关。

MAINT ENANCE

- In order to avoid blocking of the internal tubing and valve for dental unit, you should use the clear water.
- You should pay attention to draining sewage, there is moisture in the air, according to the local air humidity ,you should drain dirty water once about one month (when large loadwork,should be half month).
- Dental chair is still the integration stage between machine and motor ,so you should lubricate the motor when use it about half year.
- Trying your best to avoid lacerating the cushion by the key or other edge tool of patient .
- Do not use the dental chair in the event of power supply instability, so as not to damage the electronic parts inside of the dental chair.
- In summer,could unplug the water heater in the box (could consult the local distributor); when it is low temperature below zero in winter ,while it is out of work ,please blow inside water to be dry ,otherwise the water heater may freeze to damage under the very low temperature during the night.
- For the dental unit ,after a day of work , must be cut off electricity,broken water,broken gas and sanitized.